

나프탈렌-퍼지·트랩/기체크로마토그래피
-질량분석법
(Naphthalene-Purge-Trap/Gas Chromatography-Mass
Spectrometry)

2014

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 물속에 존재하는 나프탈렌을 측정하기 위한 것으로 퍼지·트랩 전처리 장비를 이용하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입하여 분석한다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 폐수 또는 나프탈렌의 농도가 비교적 높은 지표수, 지하수 등에 적용하며, 정량한계는 0.003 mg/L이다.

1.3 간섭물질

실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류 및 실험도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염 여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.32 mm, 필름두께 1.8 μm , 길이 60 m의 Rtx-624의 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 200 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 $^{\circ}\text{C}$ ~ 210 $^{\circ}\text{C}$) 조작한다.

3.2 질량분석기 (mass spectrometer)

3.2.1 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법 (SIM, selected ion monitoring)을 사용하고, 이온질량수 (m/z)는 표 4를 참고한다.

3.2.4 연결관의 온도는 220 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

3.3 퍼지·트랩 장치 (purge and trap system)

3.3.1 퍼지부는 5 mL ~ 25 mL의 시료를 주입할 수 있는 스파저 (sparger) 및 시료를 일정 온도로 가열할 수 있는 가열장치(선택사항)로 구성되어 있다.

3.3.2 트랩관은 길이 5 cm ~ 30 cm이상, 안지름 2 mm이상의 스테인리스강관에 휘발성 유기화합물을 흡착·농축할 수 있는 충전제가 충전된 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것으로 구성되어 있다.

3.3.3 탈착부는 트랩관에 농축된 휘발성 유기화합물을 가열·탈착할 수 있는 가열

장치를 포함하고 있다.

3.3.4 냉각 응축부는 연결되어 있는 안지름 0.20 mm ~ 0.53 mm의 모세관 컬럼을 -50 °C ~ -150 °C 정도로 냉각 가능하고, 또한 200 °C로 가열 가능한 장치 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것으로 이루어져 있으며, 경우에 따라 냉각 응축 과정은 생략해도 좋다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

시약급 정제수를 사용하거나 정제수를 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성 기체로 1시간 탈기하여 휘발성 유기물질을 제거하고 입구가 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 나프탈렌 (naphthalene, $C_{10}H_8$, 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 아세톤 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

4.2.3 내부표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 클로로벤젠- d_5 (chlorobenzene- d_5 , C_6Cl-d_5 , 분자량 : 117.59)을 0.100 g을 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.4 내부표준용액 (10.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 내부표준원액 0.1 mL를 넣고 아세톤 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

ES 04130.1c 시료의 채취 및 보존 방법에 따른다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준 물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 ES 046001b 정도보증/정도관리에 따른다. 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 ES 04001b 정도보증/정도관리에 따른다. 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물

질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 7.0항과 동일하게 측정하여 구한다.

6.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다

.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차 (RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내이어야 한다.

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리 "내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 검정곡선법

7.2.1.1 기밀주사기 또는 자동주입기로 시료 5 mL ~ 25 mL (장치에 따라 부피를 달리할 수 있다)를 정확히 취하여 바이알 또는 스파저 내에 주입한다.

7.2.1.2 일정 온도에서 일정 시간 동안 휘발성 유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음, 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.1.3 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.2.2 내부표준법

7.2.2.1 주사기 및 바이알에 시료 5 mL ~ 25 mL를 정확히 취한 후, 내부표준용액 (10 mg/L)을 일정량 첨가한다.

7.2.2.2 일정 온도에서 일정 시간동안 휘발성 유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음, 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2.3 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 측정하여 휘발성 유기화합물의 피크면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선법

7.3.1.1 50 mL 볼륨플라스크에 나프탈렌이 들어있는 0.5 mg/L 표준용액 100 μ L, 2.5 mg/L 표준용액 100 μ L, 5.0 mg/L 표준용액 100 μ L, 25.0 mg/L 표준용액 100 μ L, 50.0 mg/L 표준용액 100 μ L를 정확히 취하여 넣은 뒤 정제수로 50 mL를 정확히 맞춘다. 검정곡선의 감응계수가 유지되는 범위 내에서 보다 고농도의 표준용액을 사용할 수 있다. 검정곡선용 표준용액도 7.2항에 따른다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 시료 중의 농도로 계산하면 1 μ g/L, 5 μ g/L, 10 μ g/L, 50 μ g/L, 100 μ g/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.1.2 일정 온도에서 일정시간동안 휘발성 유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프-질량분석기로 주입한다.

7.3.1.3 휘발성 유기화합물의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 휘발성 유기화

합물에 해당하는 피크면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 내부표준법

7.3.2.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 mL ~ 25 mL를 정확히 취한 후, 휘발성 유기화합물 표준용액 (10 mg/L)를 단계적으로 취하여 넣고, 내부표준용액 (10 mg/L)을 일정량 취하여 시료에 첨가한다.

7.3.2.2 일정 온도에서 휘발성 유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프-질량분석기로 주입한다.

7.3.2.3 휘발성 유기화합물의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 크로마토그램으로부터 휘발성 유기화합물의 피크면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 검정곡선법

각 분석물질별 피크의 면적 (A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도}(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_x : 분석물질의 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.2 내부표준법

피크면적 비 (A_x/A_i)를 검정곡선식의 y 자리에 대입하여 x 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도}(mg/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, A_x/A_i : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

9.0 참고자료

9.1 Standard Method 6200B, “Purge and Trap Capillary-Column Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method”, 21th edition, (2005).

9.2 먹는물공정시험기준 ES 05601.1a, “휘발성 유기화합물-퍼지·트랩/기체크로마토그래피-질량분석법”, 환경부, (2010).

9.3 EPA Method 624-Purgeables, “Methods for organic chemical analysis of municipal and industrial wastewater”, (1991).

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %

표 2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프 기기분석 조건 예

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6 % cyanopropylphenol / 94 % dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
연결관의 온도	220 °C				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

표 3. 나프탈렌의 퍼지 · 트랩 장치 실험조건 예

항목	조건
수분제거부 준비온도	100 °C
퍼지 시간	7 min
건조퍼지 시간	0.5 min
수분제거부 탈착온도	35 °C
탈착온도(시간)	240 °C(4 min)

표 4. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129
클로로벤젠-d ₆	117	117	82

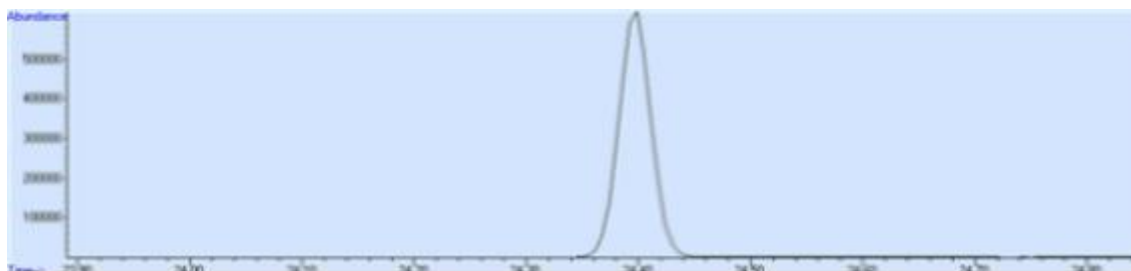


그림 1. 나프탈렌의 크로마토그램

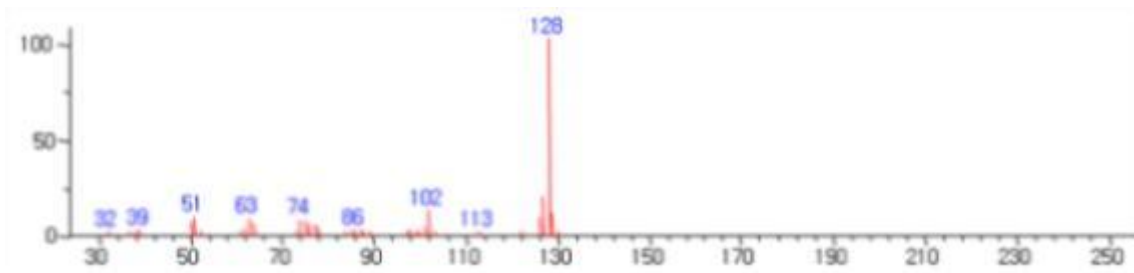


그림 2. 나프탈렌의 질량스펙트럼

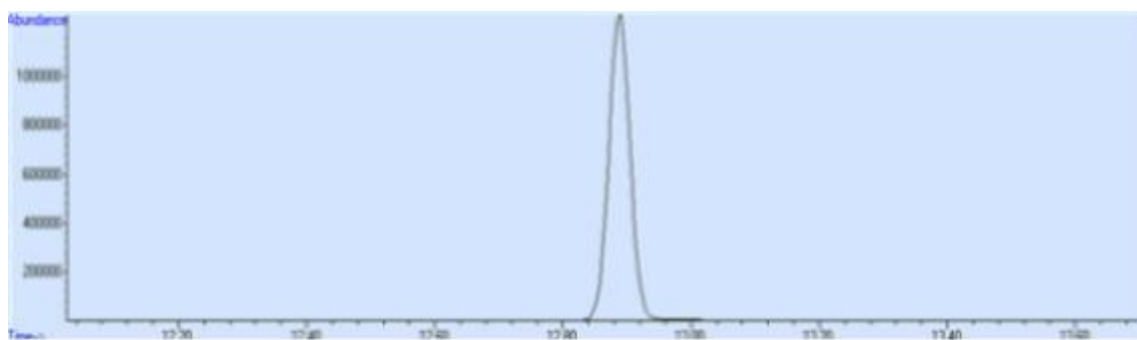


그림 3. 내부표준물질 클로로벤젠-d₅의 크로마토그램

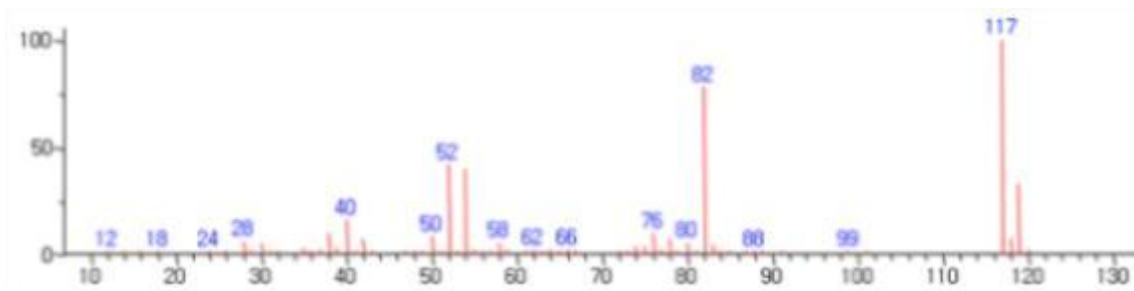


그림 4. 내부표준물질 클로로벤젠-d₅의 질량스펙트럼